

Twin Luscent Anchors®

Translucent Aesthetic Post System
Installation Procedure



GB, SE, BG, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IT,
LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SL

GB: Indication for use: As support to and to secure coronal restorations.
Note: Brand name dual cure off-the-shelf adhesives and restorative materials may be safely combined with the Twin Luscent Anchors. Self-curing resins that may prematurely polymerize in the canal should be avoided.

S: Användningsområde: Som support vid kronuppbbyggnad.
Observera: Använd dualhärdande bonding- och restaurationsmaterial för säker användning med Twin Luscent Anchors. Självhärdande (autopolymeriserande) material kan härda för tidigt i kanalen, och bör därför undvikas.

BG: Показания за употреба: За поддържане и осигуряване на възстановявания на коронки.
Забележка: Готовите за ползване лепила за двойно втвърдяване и реставрационните материали със запазена марка може безопасно да се комбинират с Twin Luscent Anchors. Трябва да се избягват самосъхнещите смоли, които могат преждевременно да полимеризират в канала.

CZ: Indikace pro použití: Jako podpora a k zajištění korunkových rekonstrukcí.
Poznámka: Značková standardní adheziva a materiály náhrady s dvojitou polymerizací lze bezpečně kombinovat s kotvením Twin Luscent Anchors. Nepoužívejte samotuhnoucí pryskyřice, které by mohly v kanálku polymerizovat předčasně.

DE: Gebrauchsanweisung: Zur Unterstützung und zur Sicherung koronaler Restaurationen.
Hinweis: Selbsthärtende Materialien, die im Kanal vorzeitig aushärten könnten, vermeiden. Bewährte dual-härtende Materialien verwenden, so wird eine gute Verankerung und stabile Basis für tadellose ästhetische Restaurationen erzielt.

DK: Indikation for brug: Som støtte til og for at sikre koronale restaureringer

Bemærk: Brug dual-hærdende bonding- og genopretningsmaterialer for sikker anvendelse med Twin Luscent Ankre. Selvhærdende (autopolymeriserende) materiale kan hærde for tidligt i kanalen og bør derfor undgås.

EL: Ενδείξεις χρήσης: Για την υποστήριξη και την ασφαλή συγκράτηση αποκαταστάσεων της στεφάνης.

Σημείωση: Οι άξονες Twin Luscent Anchor μπορούν να συνδυαστούν με ασφάλεια με επώνυμες κόλλες διπλού πολυμερισμού του εμπορίου και υλικά αποκατάστασης. Πρέπει να αποφεύγονται ρητίνες αυτοσκλήρυνσης οι οποίες ενδέχεται να πολυμεριστούν πρόωρα στο σωλήνα.

ES: Indicaciones de uso: Como soporte y restauración coronaria

IMPORTANTE: Deben evitarse resinas de fotopolimerizado que puedan polimerizar de forma prematura en el canal. Se pueden aplicar materiales autorizados de fotopolimerización o polimerización dual que proporcionan un poste firme y restauraciones estéticas impecables.

FI: Käyttöaiheet: Hammaskruunun restaurointien tukeminen ja kiinnittäminen.

Huomio: Kaupallisesti saatavilla olevia minkä tahansa tuotemerkin sidosaineita ja paikkamateriaaleja voi turvallisesti käyttää yhdessä Twin Luscent Anchors -ankkurien kanssa. Itsekovettuvia hartseja, jotka voivat polymeroitua ennenaikaisesti juurikanavassa, tulee välttää.

FR: Indication: Le tenon radicaire sert de support et de fixation de la reconstitution coronaire. Les adhésifs et les matériaux de restauration à double cure peuvent être combinés en toute sécurité avec les ancrages Luscent Twin. Les résines auto-durcissantes qui peuvent polymériser prématurément dans le canal doivent être évitées.

HR: Indikacije za uporabu: namijenjeno za potporu i uèvršæivanje pri koronarnim restauracijama.

Napomena: komercijalno dostupni adhezivi i restorativni materijali zaštiæenog naziva za dvostruku svjetlosnu i kemijsku polimerizaciju mogu se sigurno upotrebljavati s proizvodima Twin Luscent Anchors. Izbjegavajte samopolimerizirajuæe smole koje se mogu preuranjeno polimerizirati u kanalu.

HU: Használati javallat: Koronás fogpótlások megtámasztásához és rögzítéséhez.

Megjegyzés: A különbözö márkájú azonnal használható kétkomponensû ragasztóanyagok és fogpótlási anyagok biztonságosan használhatóak a Twin Luscent Anchors rögzítökkel. Kerülendö az önmagában kötö gyanták használata, amelyek esetleg túl hamar polimerizálódnak a csatornában.

IT: Indicazione per l'uso: come sostegno e per proteggere i restauri coronali.

Nota: Utilizzare adesivi e materiali per restauro di elevata qualità con i Perni Twin Luscent Anchors. Evitare l'uso di resine autopolimerizzanti che possono polimerizzare precocemente nel canale e compomeri.

LT: Naudojimo paskirtis. Dantų karūnėlių restauracijų paramai ir tvirtinimui.

Pastaba. Su „Twin Luscent Anchors“ galima saugiai naudoti prekių ženkle dvejopo kietėjimo į rinką tiekiamus klijus ir restauracijai naudojamus medžiagas. Reikia vengti savaime kietėjančių dervų, nes jos kanale gali polimerizuotis pirma laiko.

LV: Lietošanas indikācija: lai atbalstītu un nostiprinātu kroņa restaurācijas.

Piezīme: ar Twin Luscent Anchors materiāliem droši var kombinēt zīmola nosaukuma lietošanai gatavus adhezīvus un restaurāciju materiālus, kas cietināmi divējādi. Jāizvairās lietot pašcietējošus sveķus, kas var pārmērīgi ātri polimerizēties kanālā.

NL: Indicatie voor gebruik: Ter ondersteuning van en om coronale restauraties te beveiligen.

Opmerking: Het gebruik van zelfhardende composieten die mogelijk voortijdig polymeriseren in het wortelkanaal dient te worden vermeden. Gekeurde dual uithardende materialen kunnen worden.

NO: Bruksindikasjoner: Til støtte og sikring av koronal restaurering.

Merk: Varemerket hyllevare av doble herdemidler og materialer for restaurering kan kombineres på sikker måte med Twin Luscent Anchors. Selvhærdende harpikser som kan polymerisere for tidlig i kanalen, bør unngås.

PL: Informacje dotyczące użytkowania: Jako podparcie i zabezpieczenie wypełnień w czêœci koronowej zêba.

Uwaga: Nazwa handlowa podwójnie utwardzane kleje i materiały do wypełnień sprzedawane bez recepty mogą być bezpiecznie łączone z kotwicami Twin Luscent Anchors. Należy unikać żywic samoutwardzalnych, które mogą przedwzeczanie spolimerzowac w kanale.

PT: Indicação para utilização: Serve como suporte e para fixar restauros de coroas.

Nota: Os materiais de restauro e os adesivos existentes de cura dupla de marca podem ser combinados de forma segura com a gama Twin Luscent Anchors. Devem ser evitadas resinas de autocura que possam polimerizar prematuramente no canal.

RO: Indicații pentru utilizare: Ca suport al restaurărilor coronare și pentru fixarea acestora.


Notă: Adezivii universali de marcă cu priză dublă și materiale restaurative pot fi combinate în siguranță cu Twin Luscent Anchors. Rășinile cu auto-întărire care pot polimeriza prematur în canal trebuie evitate.

SK: Indikácie na použitie: Ako podpora a na zaistenie korunkových rekonštrukcií.


Poznámka: Bežné značkové adhezíva a výplňové materiály vytvrdzované s dvojitým vytvrdzovaním môžu byť bezpečne použité s kotvením Twin Luscent Anchors. Nepoužívajte samotvrdnúce živice, ktoré by mohli predčasne polymerizovať v kanáli.

SL: Indikacije za uporabo: Za podporo in zašèito koronarnih restavracij.


Opomba: Z izdelki Twin Luscent Anchors je mogoèe varno kombinirati komercialna lepila in restavracijske materiale razliènih blagovnih znamk, ki se sušijo z dvojnim sušenjem. Izogibajte se uporabi samosušeèih smol, ki se v kanalu prehitro polimerizirajo.

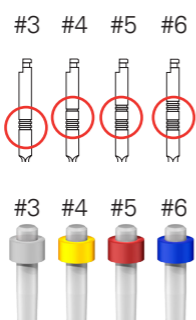

1


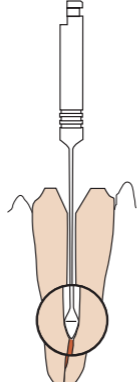


Pathfinder

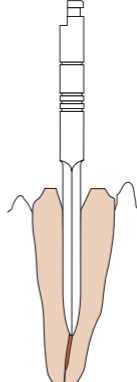


Dentatus Classic Reamer

2

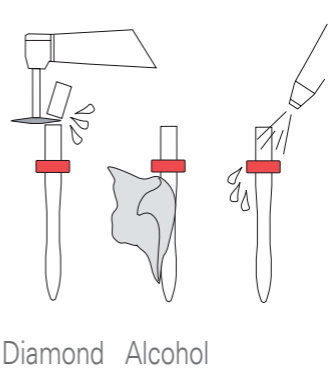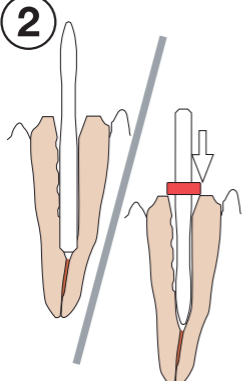

Diamond Alcohol


3

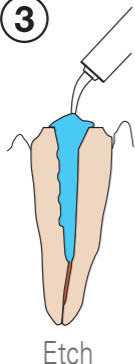

Etch




H₂O

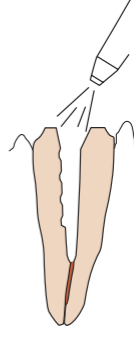

4




Bonding Agent

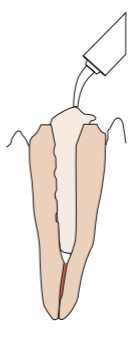


Flowable Resin


5

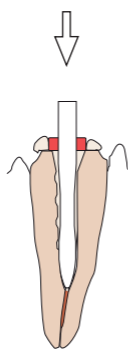


Core Build-up

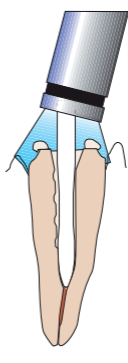

6

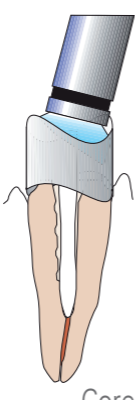

Core Preparation

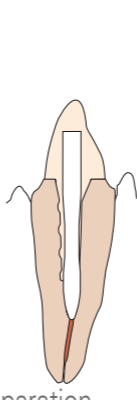

BL-6751-00_2017-05-17

Dentatus AB
Finspångsgatan 42
SE-163 53 Spånga, Sweden

www.dentatus.com



MADE IN SWEDEN

SE +46 8 546 509 00
info@dentatus.se

US + 1 212 481 1010
dentatus@dentatus.com