

Luscent Anchors® & Luscent-R Anchors™

Translucent Endodontic Posts Installation Procedure

RX only  0413  

EN: Indication for use: As to support and secure coronal restorations.
Note: Brand name light or dual cure off-the-shelf adhesives and restorative materials may be safely combined with the Luscent Anchors. Self-curing resins that may prematurely polymerize in the canal should be avoided.

SV: Användningsområde: Som support vid kronuppbbyggnad.
Observera: Använd ljus- eller dualhärdande bonding- och restaurationsmaterial för säker användning med Luscent Anchors. Självhärdande (autopolymeriserande) material kan härda för tidigt i kanalen, och bör därför undvikas.

BG: Показания за употреба: За поддържане и осигуряване на възстановявания на коронки.

Забележка: Готовите за ползване светлополимеризиращи или двойно втвърдяващи лепила и реставрационните материали със запазена марка може безопасно да се комбинират с Luscent Anchors. Трябва да се избягват самосъхнещите смоли, които могат преждевременно да полимеризират в канала.

CS: Indikace pro použití: Jako podpora a k zajištění korunkových rekonstrukcí.

Poznámka: Značková standardní nebo svítle polymerizovaná adheziva a materiály náhrady s dvojitou polymerizací lze bezpečně kombinovat s kotvením Luscent Anchors. Nepoužívejte samotuhnoucí pryskyřice, které by mohly v kanálku polymerizovat předčasně.

DE: Gebrauchsanweisung: Zur Unterstützung und zur Sicherung koronaler Restaurationen.

Hinweis: Selbsthärtende Materialien, die im Kanal vorzeitig aushärten könnten, vermeiden. Bewährte licht- oder dual-härtende Materialien verwenden, so wird eine gute Verankerung und stabile Basis für tadellose ästhetische Restaurationen erzielt.

DA: Indikation for brug: Som støtte til og for at sikre koronale restaureringer

Bemærk: Brug lys eller dual-hærdende bonding- og genopretningsmaterialer for sikker anvendelse med Luscent Ankre. Selvhærdende (autopolymeriserende) materiale kan hærde for tidligt i kanalen og bør derfor undgås.

EL: Ενδείξεις χρήσης: Για την υποστήριξη και την ασφαλή συγκράτηση αποκαταστάσεων της στεφάνης.

Σημείωση: Οι άξονες Luscent Anchor μπορούν να συνδυαστούν με ασφάλεια με επώνυμες κόλλες φωτοπολυμερισμού ή διπλού πολυμερισμού του εμπορίου και υλικά αποκατάστασης. Πρέπει να αποφεύγονται ρητίνες αυτοσκληρυνσης οι οποίες ενδέχεται να πολυμεριστούν πρόωρα στο σωλήνα.

ES: Indicaciones de uso: Como soporte y restauración coronaria

IMPORTANTE: Deben evitarse resinas de fotopolimerizado que puedan polimerizar de forma prematura en el canal. Se pueden aplicar materiales autorizados de fotopolimerización o polimerización dual que proporcionan un poste firme y restauraciones estéticas impecables.

FI: Käyttöaiheet: Hammaskruunun restaurointien tukeminen ja kiinnittäminen.

Huomio: Kaupallisesti saatavilla olevia minkä tahansa tuotemerkin sidomaineita valo- tai kaksoiskovetteinen ja paikkamateriaaleja voi turvallisesti käyttää yhdessä Luscent Anchors -ankkurien kanssa. Itsekovettuvia hartseja, jotka voivat polymeroitua ennenaikaisesti juurikanavassa, tulee välttää.

FR: Indication: Le tenon radiculaire sert de support et de fixation de la reconstitution coronaire. Les adhésifs et les matériaux de restauration à photopolymérisation ou double cure peuvent être combinés en toute sécurité avec les ancrages Luscent. Les résines auto-durcissantes qui peuvent polymériser prématurément dans le canal doivent être évitées.

HR: Indikacije za uporabu: namijenjeno za potporu i uèvršćavanje pri koronarnim restauracijama.

Napomena: komercijalno dostupni adhezivi i restorativni materijali zaštićenog naziva za svjetlosnu ili dvostruku svjetlosnu i kemijsku polimerizaciju mogu se sigurno upotrebljavati s proizvodima Luscent Anchors. Izbjegavajte samopolimerizirajuće smole koje se mogu preuranjeno polimerizirati u kanalu.

HU: Használati javallat: Koronás fogpótlások megtámasztásához és rögzítéséhez.

Megjegyzés: A különböző márkájú fényre kötő vagy azonnal használható kétkomponensű ragasztóanyagok és fogpótlási anyagok biztonságosan használhatóak a Luscent Anchors rögzítőekkel. Kerülendő az önmagában kötő gyanták használata, amelyek esetleg túl hamar polimerizálódnak a csatornában.

IT: Indicazione per l'uso: come sostegno e per proteggere i restauri coronali.

Nota: Utilizzare adesivi e materiali per restauro di elevata qualità con i Perti Luscent Anchors. Evitare l'uso di resine autopolimerizzanti che possono polimerizzare precocemente nel canale e comprometterli.

LT: Naudojimo paskirtis. Dantų karūnėlių restauracijų paramai ir tvirtinimui.

Pastaba. Su „Luscent Anchors“ galima saugiai naudoti prekių ženklą nuo šviesos kietėjančius arba dvejopo kietėjimo į rinką tiekiamus klijus ir restauracijai naudojamą medžiagą. Reikia vengti savaime kietėjančių dervų, nes jos kanale gali polimerizuotis pirma laiku.

LV: Lietošanas indikācija: lai atbalstītu un nostiprinātu kroņa restaurācijas.

Piezīme: ar Luscent Anchors materiāliem droši var kombinēt zīmola nosaukuma lietošanai gatavus adhezīvus un restaurāciju materiālus, kas cietināmi gaismā vai divējādi. Jāizvairās lietot pašcietējošus sveķus, kas var pārmērīgi ātri polimerizēties kanālā.

NL: Indicatie voor gebruik: Ter ondersteuning van en om coronale restauraties te beveiligen.

Opmerking: Het gebruik van zelfhardende composieten die mogelijk voortijdig polymeriseren in het wortelkanaal dient te worden vermeden. Gekeurde licht- uithardende of dual uithardende materialen kunnen worden.

NO: Bruksindikasjoner: Til støtte og sikring av koronal restaurering.

Merk: Varemerket hyllevare av lys- eller doble herdemidler og materialer for restaurering kan kombineres på sikker måte med Luscent Anchors. Selvhærdende harpikser som kan polymerisere for tidlig i kanalen, bør unngås.

PL: Informacje dotyczące użytkowania: Jako podparcie i zabezpieczenie wypełnień w czêści koronowej zêba.

Uwaga: Nazwa handlowa œwiatłoutwardzalne lub podwójnie utwardzane kleje i materiały do wypełnień sprzedawane bez recepty mogą być bezpiecznie łączone z kotwicami Luscent Anchors. Należy unikać żywic samoutwardzalnych, które mogą przedwczesnie spolimeryzować w kanale.

PT: Indicação para utilização: Serve como suporte e para fixar restauros de coroas.

Nota: Os materiais de restauro e os adesivos existentes de cura dupla ou com luz de marca podem ser combinados de forma segura com a gama Luscent Anchors. Devem ser evitadas resinas de autocura que possam polimerizar prematuramente no canal.

RO: Indicații pentru utilizare: Ca suport al restaurărilor coronare și pentru fixarea acestora.


Notă: Adezivii universali de marcă cu întărire la lumină sau priză dublă și rășinile cu auto-întărire care pot polimeriza prematur în canal trebuie evitate.

SK: Indikácie na použitie: Ako podpora a na zaistenie korunkových rekonštrukcií.

Poznámka: Bežné značkové adhezíva a výplňové materiály vytvrdzované svetlom alebo s dvojitým vytvrdzovaním môžu byť bezpečne použité s kotvením Luscent Anchors. Nepoužívajte samotvrdnúce živice, ktoré by mohli predčasne polymerizovať v kanáli.


SL: Indikacije za uporabo: Za podpora in zaščitno koronarnih restavracij.

Opomba: Z izdelki Luscent Anchors je mogoče varno kombinirati komercialna lepila in restavracijske materiale različnih blagovnih znamk, ki se sušijo pod svetlobo, in takšne z dvojnimi sušenjem. Izogibajte se uporabi samosuševalnih smol, ki se v kanalu prehitro polimerizirajo.

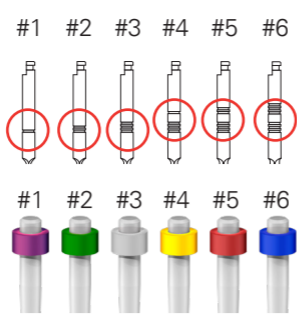


L (mm)	15	15	15	15	17	19
Ø (mm)	1	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75

1

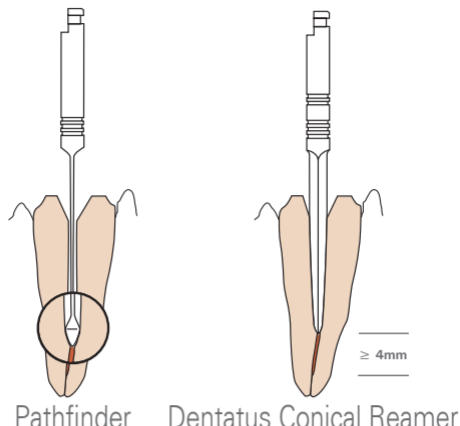


Pathfinder Dentatus Conical Reamer

2

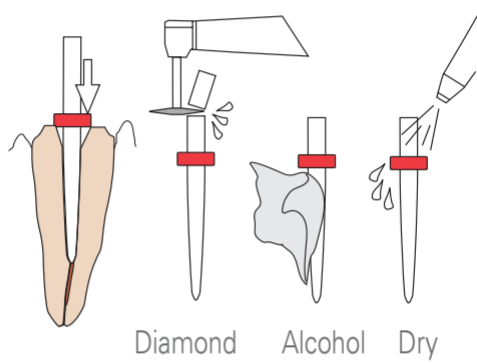


Diamond Alcohol Dry

3

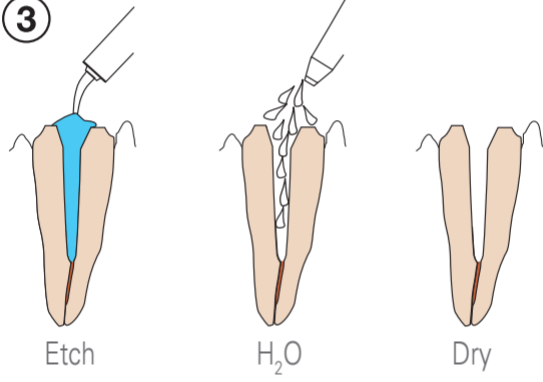


Etch H₂O Dry

4

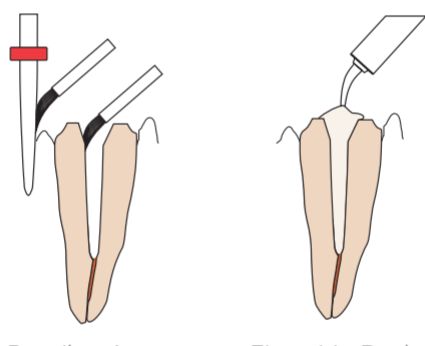


Bonding Agent Flowable Resin

5

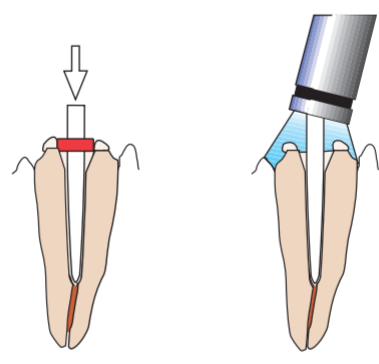

Core Build-up

6

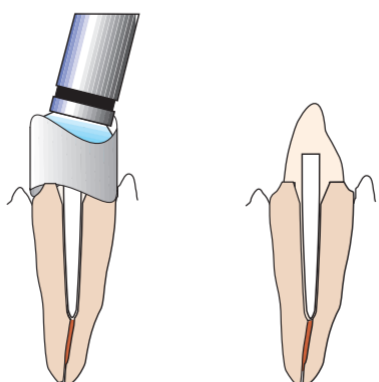

Core Preparation

BL-6752-01_2020-07-02

Dentatus AB
 Finspångsgatan 42
 SE-163 53 Spånga, Sweden



SE +46 8 546 509 00
 info@dentatus.se

US + 1 212 481 1010
 dentatus@dentatus.com

www.dentatus.com

MADE IN SWEDEN