

DENTATUS LAMINEER TIPS POUR PROFIN/EVA

POUR RESTAURATIONS CAD/CAM

Une aide excellente pour affiner les préparations de cavité

Les avantages


- Optimiser la préparation pour la numérisation
- Éliminer les dépouilles
- Réglage fin des frontières

Le système Profin avec embouts Lamineer adaptés disponibles dans différentes tailles et formes de grains permet d'obtenir des cavités fines et des restaurations CAD/CAM finales en différentes étapes. Dentatus propose un kit complet pour vos restaurations CAD/CAM contenant une pièce à main Profin PDX et les embouts Lamineer recommandés.

Différentes formes et tailles

Accès illimité aux zones intraorales

Les embouts sont à code couleur

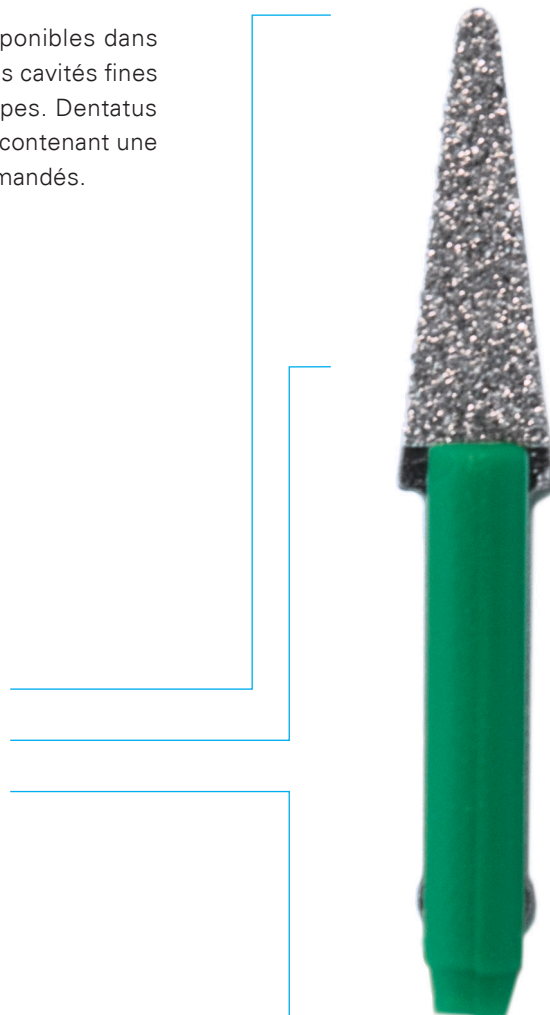

Le système Profin est une aide de choix pour les préparations de cavité affinée


« Les avantages d'une préparation de cavité lisse et nette pour les restaurations Cerec ne peuvent être sous-estimés. La qualité des restaurations Cerec sont le résultat d'excellentes préparations. J'ai trouvé que le système Profin était une aide excellente pour affiner les préparations de cavité. Il est également utile pour finir les zones interdentaires difficiles à atteindre. Les embouts LTA-S100 et LTA-S75 sont très utiles pour l'affinage des parois et des bordures proximales verticales. Les LTA-S75 et LTA-S50 sont efficaces pour le contour des bordures interdentaires et les débordements au niveau du ciment. Et les LTA-S30 et LTA-S15 sont utilisés pour la finition des contours interdentaires sans endommager la dent ou les bordures. »



– DENNIS FASBINDER,
DDS, MAGD, ABGD, ISCD Certified Instructor, MI

BOX Prep pour CAD/CAM

Associez le système PDX Profin aux embouts Lamineer appropriés pour des surfaces de coupe lisses en préparation, en les adaptant pour une analyse réussie

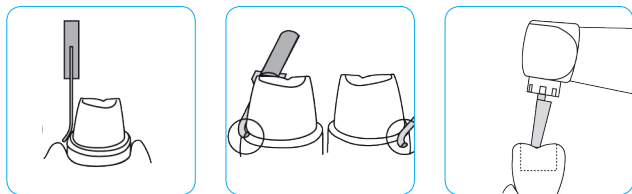

PDX/CCK – Kit complet pour CAD / CAM, basée sur Profin PDX / SK

– Y compris la pièce à main et des conseils PDX recommandées pour les restaurations CAD / CAM

- LTA-S100
- LTA-S15
- LTA-S75
- LTA-S50
- LTA-150
- LTA-39
- LTA-30
- EVA-2000
- EVA-5000
- Profin PDX Hand Piece

