

DENTATUS PROFIN IPR НАКРАЙНИЦИ ЗА PROFIN

ЗА БЕЗОПАСНА ИНТЕРПРОКСИМАЛНА РЕДУКЦИЯ

Увеличаване на Трайността на Резултатите от Ортодонтското Лечение

Предимства

- Безопасността на пациентите е приоритет
- Контролът е във вашите ръце
- Използването е улеснено
- Естетичността е изцяло естествена

Най-новото допълнение на Dentatus към многообразието на Ламинираните накрайници за PROFIN–Накрайници за високоценената и добре приета реципрочна Profin Directional Система –това са Profin IPR накрайниците за интерпроксимална редукция.

Profin е най-важното допълнение при всяка област на стоматологията , но най-вече при ортодонтията. За лекаря по дентална медицина безопасността на пациента е най-важният приоритет, ето защо ние развиваме Profin IPR. С Profin IPR стоматолозите могат да коригират диспропорционалните зъбни размери, да отстраняват натрупването, да предпазват емайла и да увеличават трайността на резултатите от ортодонтското лечение. Profin IPR намалява риска от прекомерното оголване, осигурявайки по този начин по-ограничено премахване на емайла в предписаните граници.

Profin IPR също елиминира риска от увреждане на гингивалната тъкан.

Накрайници с обезопасена страна

Двустранни накрайници

Накрайници с цветови код



Безопасността на нашите пациенти е Основен Приоритет.


Profin IPR намалява риска от прекомерното оголване, осигурявайки по този начин по-ограничено отстраняване на емайла в предписаните граници. Profin IPR също елиминира риска от увреждане на гингивалната тъкан.

Контролът е във Вашите Ръце.

При използване с реципрочната Profin Directional Система Profin IPR се движи плавно, като апроксималното движение от 1.2 милиметра позволява съкратени корекции, гарантира безопасност, бързина и ефикасно модифициране.


Използването е улеснено.

Profin IPR контролира редуцията като избягва вдлъбването на зъбите. Така ви се дава възможност да достигнете всички необходими места за оптимални резултати, оформяне, фина обработка и запазване на естествената анатомия на зъба.

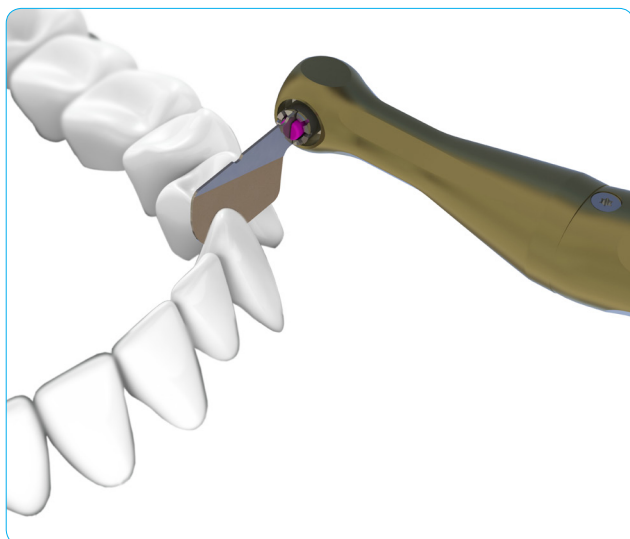

Естетичността Никога Не Е Била По-Естествена

С Profin IPR практикуващите могат лесно да възстановят естествените очертания на зъбите с разнообразието от Ламинирани накрайници (Lamineer Tips) в многообразните форми, размери и грапавини.

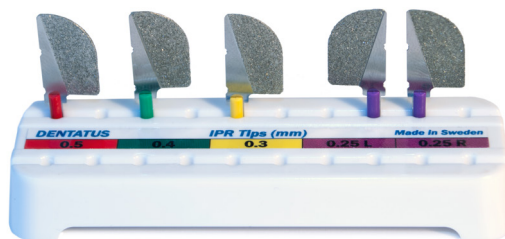

Описание на продукта :

LTA-P25R : Виолетова дръжка, с обезопасена страна – абразивен на дясната страна, когато дръжката се насочва надолу и обратно на накрайника към стоматолога. Дебелина на режещия ръб-0.25 mm.

LTA P25L : Виолетова дръжка, с обезопасена страна – абразивен на лявата страна, когато дръжката се насочва надолу и обратно на накрайника към стоматолога. Дебелина на режещия ръб-0.25 mm.

LTA-P3 : Жълта дръжка. Двустранен. Дебелина на режещия ръб-0.3 mm.

A-P4 : Зелена дръжка. Двустранен. Дебелина на режещия ръб-0.4 mm.

LTA-P5 : Червена дръжка. Двустранен. Дебелина на режещия ръб-0.5mm.

Всичките IPR накрайници имат едни и същи грапавини -еквивалент на 50 микрона.

Кодирането на цветовете е свързано само с дебелината на режещия ръб.

Първоначален комплект и пълнители.

Вие можете да закупите комплекта на Profin IPR с пет накрайника и поставката или да закупите накрайниците отделно в опаковка по два броя.



Dentatus AB
www.dentatus.com
SE: +46 8 546 509 00
info@dentatus.se
US: +1 212 481 1010
dentatus@dentatus.com

